

Maks belastning: 300 kg



AmpSling er en løftesele som er enkel for pleieren å applisere, samtidig som den gir brukeren trygghetsfølelse ved alle forflytninger. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og helt opp til over hodet. RoMedic AmpSling er utformet for bruk i de vanligste løftesituasjoner der man ikke vil ha splittede benstroppler, som f.eks. der brukeren har en høy benamputasjon.

AmpSling finnes i flere materialvalg. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukers funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke løftesituasjoner den skal benyttes i.

RoMedics løfteseler og løftere inngår i SystemRoMedic, en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les bruksanvisningen

Les bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå risiko for at brukeren glir ut av selen ved å velge riktig størrelse på løfteselen. Er løfteselen for stor øker risikoen for dette.

La aldri brukeren være alene under oppreisningsmomentet.

Monter først løfteselens ryggstroppler, før du setter på stroppene for bena.

Benytt alltid godkjent løftebøyle.

Plassering av løftesele når brukeren sitter i rullestol/stol eller seng:




1



2



3

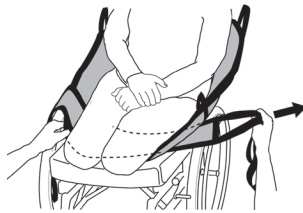

4


1. Hold løfteselen i den ene hånden og plasser den andre hånden i lommen på den nedre kanten på selen. Hvis brukeren kan bøye seg fremover gjør dette plasseringen av løfteselen enklere. Før løfteselen ned bak brukerens rygg ved å la den gli ned langs rullestolens rygg/seng. Det er optimalt om den kommer helt ned til halebenet på brukeren. Løfteselens midtlinje skal følge brukerens ryggrad.

2. Vær nøye med å få løfteselen godt rundt setet på brukeren. Dette gjøres enklest ved å benytte rommet ved bakre hjørne på rullestolsetet.

3. Jobb frem stroppene langs lårenes utside. Sitt gjerne foran brukeren og trekk i den nedre kanten på benstroppene slik at løfteselen blir på plass rundt setet på brukeren. Sett ditt kne mot brukerens kne slik at man unngår at brukeren blir for langt frem i rullestolen.

4. Etter at du har kontrollert at begge benstroppene er like lange på begge sider, kan du plassere dem under brukerens lår. Vanligvis plasseres begge stroppene under begge lårene på brukeren. Plasser benstroppene gjennom styreløkkene på løfteselens nedre kant. Hev løftebøylen forsiktig og stopp opp for å kontrollere at alt fungerer som det skal, før du løfter brukeren fra underlaget.

Fjerning av løfteselen når brukeren sitter:

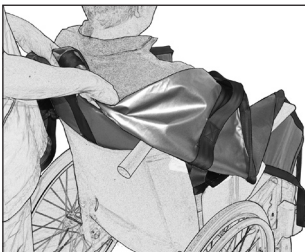


Fold benstroppen og la den gli mot seg selv når du trekker den ut på siden av låret. Trekk løfteselen opp bak brukerens rygg.

Plassering av løfteselen når brukeren ligger i seng/benk eller gulv:



1

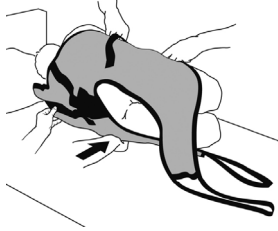


2

1. Vend brukeren mot deg. Plasser løfteselen slik at merkelappen er ned mot underlaget og midtmarkeringene følger ryggraden. Løfteselens øvre kant skal være i skulderhøyde og den nedre kanten dekker halebenet. Plasser løfteselen så langt inn under brukeren som overhode mulig. Sørg for at ryggdelen dyttes godt inn under kroppen, slik at du får tak i den på den andre siden etter at du har vendt brukeren tilbake på rygg.



3

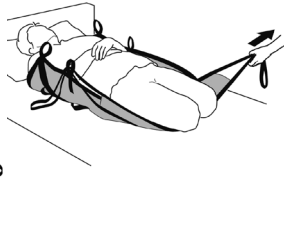

4

2. For lettere håndtering og færre momenter kan du i sideleie krølle ryggdelen mot brukers rygg og samtidig plassere benstroppene under brukers ben. Da er det enklere å trekke frem selene når brukeren ligger på løfteselen.
3. Vend brukeren tilbake på løfteselen og dra frem ryggdelen og benstroppene. Benstroppene plasseres slik at de overlapper hverandre under brukers ben.
4. Trekk benstroppene gjennom styreløkkene på løfteselens nedre kant. Hev løftebøylen forsiktig og stopp opp for å kontrollere at alt fungerer som det skal, før du løfter brukeren fra underlaget.

Fjerning av løfteselen når brukeren ligger:



Vend brukeren mot deg og fold inn selen under brukeren, slik at stoffet glir mot seg selv og du lett kan trekke ut løfteselen under brukeren.


Alternative bruksområder for løfteselens benstropper:



1



2

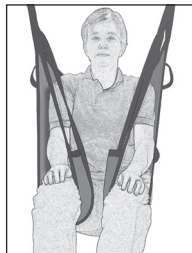

3

1. Benstroppene plasseres slik at de overlapper hverandre under brukerens ben.
2. Benstroppene kan krysses før de festes på løftebøylen. Dette anbefales ikke på personer med amputasjoner ved kneet eller høyere opp.
3. Man kan også velge å ikke krysse benstroppene, men vær på vakt siden det da er høyere risiko for at brukeren kan gli ut av løfteselen. Dette anbefales ikke på personer med amputasjoner ved kneet eller høyere opp.

Materiale:

Polyester: Slitesterkt materiale med lite friksjon.

Polyesternet: Luftig materiale som når ved behov kan bli værende under brukeren.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for lang levetid på materialet.

Størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2 og 4 punktets løftesituasjoner. Uansett må man alltid sjekke og sikre at bredden på løftebøylen fungerer til løfteselens størrelse og brukerens forutsetninger. For sikkerhet og hygiene, bruk løfteselene individuelt dvs. en sele tilpasset hver bruker.

Størrelse		XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla	XXL/Hvit
Anbefalt brukervekt	lbs	40-88	77-132	110-176	154-242	220-286	264,5-397
	kg	20-40	30-60	50-80	70-110	100-130	120-180
Løfteselens Høyde	cm	85	90	97	100	100	100

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic[®]