
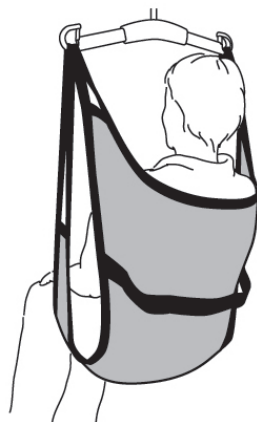


# ClassicSling

System**RoMedic**

# Manual

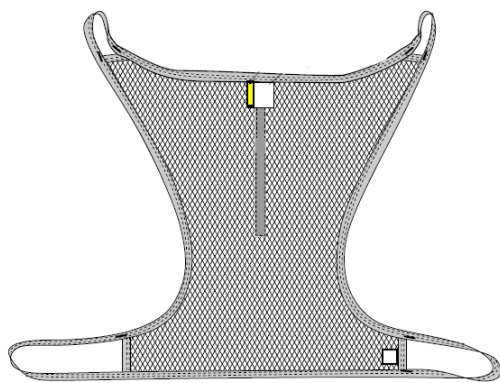

Maks belastning: 300 kg



ClassicSling gir brukeren en god sittestilling og trykghetsfølelse ved forflytning. Den er laget i polyesternet og er utformet slik at brukeren ved behov kan bli sittende på ClassicSling etter en forflytning. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og helt opp til skuldrene. ClassicSling er utformet for bruk i de vanligste løftesituasjoner, som f. eks fra seng til rullestol etc.

RoMedics løfteseler og heiser inngår i SystemRoMedic, en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRomedic har fire kategorier av forflytninger; overflytning, posisjonering, støtte og løft.



## Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon



Foreta regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og fritt for skader og at det ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid bruksanvisningen

Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå risiko for utglidning eller andre ubehag ved å velge riktig størrelse på løfteselen. For stor løftesele gir høy risiko for utglidning. La ikke brukeren være alene under løftemomentet. Fest først selens ryggfester, deretter fester man beinfestene. Bruk godkjent løftebøyle for økt sikkerhet.

## Plassering av ClassicSling skal bare utføres når brukeren ligger:

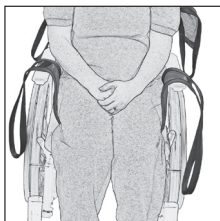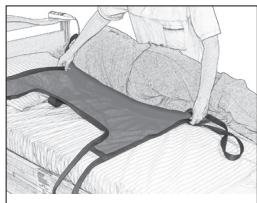

1. Vend brukeren mot deg. Plasser løfte-selen slik at merkelappen er ned mot underlaget og midten av løfteselen følger brukerens ryggrad. Den nedre kanten er ca 5-10 cm ovenfor brukerens knehaser. Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som overhode mulig.
2. Vend brukeren tilbake og kontroller at brukeren ligger midt på løfteselen.
3. Løft gjerne hjertebrøttet før du begynner å løfte.
4. Løfteselen kan ved behov bli i stolen.

ClassicSling fjernes kun når brukeren ligger i seng, på benk eller gulv.

Følg samme prosedyre som ved plassering, men i motsatt rekkefølge.

### Materiale:

Polyesternet: Luftig materiale som når ved behov kan bli værende under brukeren.

### Vedlikeholdsråd:

Les merkeetiketten på løfteselen.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for lang levetid på materialet.

### Størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2 og 4 punkts løftesituasjoner. Uansett må man alltid

sjekke og sikre at bredden på løftebøylen fungerer til løfteselens størrelse og brukerens forutsetninger.

For sikkerhet og hygiene, bruk løfteselene individuelt dvs en sele tilpasset hver bruker.

Størrelse		XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla
Anbefalt brukervekt	lbs	44-88	66-132	121-187	176-265	243-309
	kg	20-40	30-60	55-85	80-120	110-140
Løfteselens høyde	inch	31,5	35,5	37,5	38,5	39,5
	cm	80	90	95	98	100

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller [www.handicare.no](http://www.handicare.no). Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: [www.handicare.no](http://www.handicare.no)

#### Produsent:

RoMedic AB  
Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46 (0)8-594 773 33  
Faks: +46 (0)8-594 773 44  
E-post: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)  
[www.romedic.com](http://www.romedic.com)

#### Leverandør:

Handicare AS  
Øreveien 37  
Postboks 163  
1501 Moss  
Tel: 03250  
Faks: 85 02 88 22  
E-post: [post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)